

Portafuga

La Portafuga Portable de 8-plazas es un económico diseño de Centrífuga de Velocidad Fija para girar sobre la marcha*. Esta unidad se acomoda con la mayoría de los tubos de ensayo de 3ml – 15ml. Esta unidad esta libre de mantenimiento y la tapa permite una fácil visualización y una adecuada calibración. Basta con insertar el cable de conexión a la toma de energía de su coche y de forma rápida procederá a separar sangre a 3100rpm (+/- 10%).

***No operar la centrífuga mientras maneja.**

VENTAJAS

Unidad Portable, 12v, funciona en cualquier coche
Peso Ligero
Silenciosa, operación libre de vibraciones
Diseño ahorrador de espacio

CARACTERÍSTICAS

Patas de goma para evitar el bamboleo
Capacidad de 8 tubos de 3-15ml.
Motor de 12v. libre de mantenimiento
Luz indicadora de energía (Led Azul)
Apoyos de succión-ahuecada en las patas para evitar el deslizamiento
Requiere 80watt de energía
Maximo RCF=1300-1500 g
3000-3500rpm de velocidad fija, solo para sangre (la velocidad puede variar segun el modelo del coche) Auto-apagado a 30 minutos con campana
Rotor Angular 45°

INCLUYE

Rotor para ocho-tubos
Ocho fundas para tubos de 15ml
Ocho fundas para insertar tubos de 13x75mm
Tapa con interruptor de seguridad

PESO Y DIMENSIONES

Alto: 10" (254mm)
Longitud: 10" (254mm)
Ancho: 10" (254mm)
Peso: 11 lbs (5kg)



Portafuga

Modelo#	Descripción
E8C-08AF-150P	Centrífuga Portafuga, velocidad fija

ACCESORIOS



PTA-ADBA-12V7
Pinzas de 12 volt para batería



E8P-ADWL-12V8
AC-DC adaptador de energía



E8P-HLD7-CAR7
Asiento para el coche


Scientific

P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com

Beneficios de la Centrífuga Mobil

En salud las enfermeras y médicos a menudo se basan en la sangre de los pacientes para realizar pruebas de laboratorio. Las pruebas de suero comunes son:

- *CMP – Perfil Metabólico Comprensivo, se realiza con 14 diferentes pruebas.
- *BMP – Perfil Metabólico Básico, se realiza con 8 diferentes pruebas.

¿Esta centrifugando sus tubos de ensayo después de una hora?

Es altamente recomendable que los tubos CMP y BMP sean girados dentro de una hora de lo contrario los resultados de pruebas de glucosa puede dar resultados falsos bajos, y las pruebas de potasio pueden dar resultados falsos altos. Para resolver esto las enfermeras comunitarias que frecuentemente salen de casa, regresan al laboratorio, van a la siguiente casa y vuelven a regresar al laboratorio, etc.

Si la centrifugación no es posible en una hora, la enfermera podría necesitar un tubo adicional con preservativo de Fluoruro de Sodio para obtener resultados de pruebas de Glucosa, agregando mas tiempo y gastos.



SIN UNA CENTRIFUGA PORTABLE LE ESPERA:

- Costos elevados por reactivos adicionales
- Costos altos por mas tubos de ensayo y suministros.
- Costos mayores por las pruebas de laboratorio adicionales
- Mas gastos de desplazamiento
- Menos pacientes por día
- Resultados menos precisos en las pruebas de laboratorio


CON UNA CENTRIFUGA PORTABLE LE ESPERA:

- El doble de clientes diarios
- Millas reducidas
- Bajo costos en tubos y reactivos
- Mas precisión en resultados de laboratorio
- Pacientes más satisfechos
- Mayor beneficio

Sin Portafuga



Con Portafuga

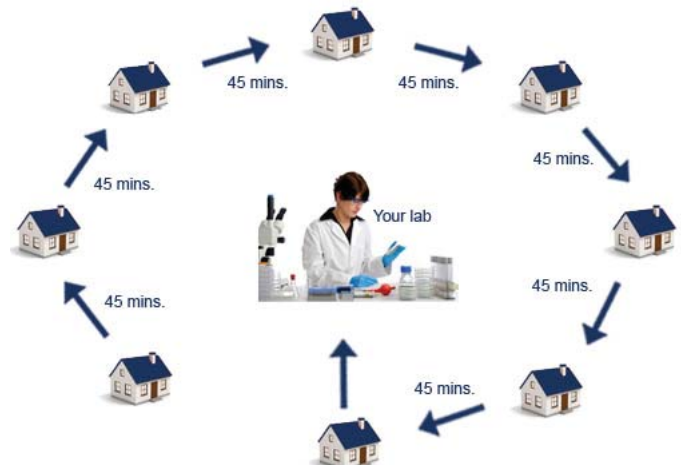

P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com